

Aplicación:
Utilice un lubricante a base de agua si es necesario. Introduzca las bolas con cuidado. Utiliza la correa de retorno para sujetar la pelota en la mano y sacarla. Síguela moviéndote durante unos 15 minutos.

Consejos de aplicación:
Utilice únicamente lubricante de base acuosa. No utilizar con aceites de masaje. Limpíalo bien antes y después de usarlo y utiliza un limpiador de juguetes.

Datos técnicos:
Material: La silicona médica es muy respetuosa con la piel, suave y resbaladiza. La impermeabilidad asegura un tiempo de juego húmedo y feliz. De forma ergonómica y especialmente suave para su inserción. Puede extraerse de forma segura en cualquier momento con la correa de retracción. Fortalece el suelo pélvico para aumentar las sensaciones durante las relaciones sexuales.

Instrucciones De Seguridad:
Por favor, no utilice el producto durante el embarazo, con un marcapasos, en la piel hinchada o inflamada. Asegúrese de consultar a su médico antes de usar el producto en las siguientes situaciones: enfermedades y adherencias, incontinencia o problemas de descenso, embarazo, alergias, anticoncepción con un DIU. No lo use durante las relaciones sexuales, en las primeras 6 semanas después del parto y después de operaciones en la zona pélvica, para no perjudicar la cicatrización de las heridas. Después, pide consejo a tu médico. No usar el producto durante la menstruación o en caso de infecciones vaginales. Nota: Solo apto para uso vaginal. Tiempo de uso recomendado: de 15 minutos a un máximo de 4 horas diarias.

Garantía:
La garantía legal de 24 meses sólo se aplica si el producto se utiliza de acuerdo con el producto, se manipula correctamente y no se realizan cambios posteriores en el producto.

Por El Bien Del Medio Ambiente:
Puede eliminar este producto de forma ecológica en su basura doméstica.

Servicio Al Cliente:
Nuestro servicio de atención al cliente estará encantado de responder a sus preguntas sobre el producto:
Consultas por correo electrónico a info@mueller.de

Consultas a través del formulario de contacto:
[DE | https://www.mueller.de/kontakt/](https://www.mueller.de/kontakt/) • [AT | https://www.mueller.at/kontakt/](https://www.mueller.at/kontakt/)

Consultas por teléfono:
[DE | +49 731 725 57000](tel:+4973172557000) • [AT | +43 5 912 000 000](tel:+43591200000)

Applicazione:
Usare un lubrificante a base d'acqua se necessario. Inserire le palline con attenzione. Usa la cinghia di ritorno per tenere la palla in mano e tirarla fuori. Continuare a muovervi per circa 15 minuti.

Consigli per l'applicazione:
Usare solo lubrificante a base d'acqua. Non usare con oli da massaggio. Pulire accuratamente prima e dopo l'uso e usare un detergente per giocattoli.

Datos técnicos:
Material: Il silicone medico è molto adatto alla pelle, liscio e scivoloso. L'impermeabilità assicura tempi di gioco bagnati e felici. Di forma ergonomica e particolarmente delicato da inserire. Può essere estratto in modo sicuro in qualsiasi momento con la cinghia di retrazione. Rafforza il pavimento pelvico per una maggiore sensazione durante il sesso.

Istruzioni di sicurezza:
Si prega di non utilizzare il prodotto durante la gravidanza, con un pacemaker, sulla pelle gonfia o infiammata. Si assicuri di consultare il suo medico prima di indossare il prodotto nelle seguenti situazioni: malattie e aderenze, incontinenza o problemi di discesa, gravidanza, allergie, contraccezione con un IUD. Non indossare durante i rapporti sessuali, nelle prime 6 settimane dopo il parto e dopo operazioni nella zona pelvica, per non compromettere la guarigione delle ferite. Dopodiché, chiedete consiglio al vostro medico. Non indossare il prodotto durante le mestruazioni o in caso di infezioni vaginali. Nota: adatto solo per uso vaginale. Tempo di utilizzo raccomandato – da 15 minuti a un massimo di 4 ore al giorno.

Garanzia:
La garanzia legale di 24 mesi si applica solo se il prodotto viene utilizzato in conformità con il prodotto, trattato correttamente e non vengono apportate modifiche successive al prodotto.

Per il bene dell'ambiente:
Potete smaltire questo prodotto in modo ecologico nei vostri rifiuti domestici.


Servizio Clienti:
Il nostro servizio clienti sarà lieto di rispondere alle vostre domande sul prodotto: Richieste via e-mail a info@mueller.de

Richieste tramite il modulo di contatto:
[DE | https://www.mueller.de/kontakt/](https://www.mueller.de/kontakt/) • [AT | https://www.mueller.at/kontakt/](https://www.mueller.at/kontakt/)

Richieste per telefono:
[DE | +49 731 725 57000](tel:+4973172557000) • [AT | +43 5 912 000 000](tel:+43591200000)

HOT Productions & Vertriebs GmbH
Wagrainer Strasse 35
4840 Vöcklabruck

www.mueller.eu

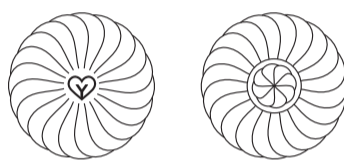

ili klimakterijske tegobe, trudnoća, alergije, kontracepcija spiralom. Tijekom spolnog odnosa u prvih 6 tjedana nakon poroda i nakon operacije zdjelice proizvod se ne smije nositi kako ne bi ometao zacjeljivanje rana. Najbolje je da o tome pitate svog liječnika ili svoju primarnju za savjet. Nije preporučljivo proizvod nositi tijekom menstruacije ili u slučaju vaginalnih infekcija. Napomena: Prikladno samo za vaginalnu upotrebu. Preporučeno vrijeme nošenja - 15 minuta do maksimalno 4 sata dnevno.

Jamstvo:
Zakonsko jamstvo od 24 mjeseca vrijedi samo za uporabu specifičnu za proizvod, pravilno rukovanje i bez naknadnih preinaka na proizvodu.

Briga o okolišu:
Ovaj proizvod možete odložiti u kućni otpad na ekološki prihvatljiv način.

Korisnička služba:
Odgovore na sva pitanja o proizvodu rado će vam dati naša korisnička služba: Pitanja putem e-pošte info@mueller.de

Upiti putem obrasca za kontakt:
[DE | https://www.mueller.de/kontakt/](https://www.mueller.de/kontakt/) • [AT | https://www.mueller.at/kontakt/](https://www.mueller.at/kontakt/)

Upiti putem telefona:
[DE | +49 731 725 57000](tel:+4973172557000) • [AT | +43 5 912 000 000](tel:+43591200000)

Prijava:
Po potrebi uporabite mazivo na vodni osnovi. Previdno stavite kroglice. S povratnim trakom držite žogu v roki in jo izvlecite. Gibajte se približno 15 minut.

Nasveti za uporabo:
Uporabljajte samo mazivo na vodni osnovi. Ne uporabljajte za masažnimi olji. Pred uporabo in po njej temeljito očistite in uporabite čistilo za igrače.

Tehnični podatki:
Material: medicinski silikon je zelo prijazen do kože, gladek in spotek. Vodooodpornost zagotavlja mokro in veselo igranje. Ergonomsko oblikovan in posebej nežen za vstavljanje. S trakom za izvek ga lahko kadar koli varno izvlečete. Krepi medenično dno za več občutka med seksom.

Varnostna navodila:
Izdelka ne uporabljajte med nosečnostjo, s srčnim spodbujevalnikom, na otekli ali vneti koži. Pred nošenjem izdelka se posvetujte z zdravnikom v naslednjih primerih: boleznin adhezije, inkontinenca ali težave s spuščanjem, nosečnost, alergije, kontracepcija z materničnim vložkom. Ne nosite med spolnimi odnosi, prvih 6 tednov po porodu in po operacijah v predelu medenice, da ne poslabšate celjenja rane. Nato se za nasvet obrnite na svojega zdravnika. Izdelka ne nosite med menstruacijo ali v primeru vaginalnih okužb. Opomba: Primerno samo za vaginalno uporabo. Priporočeni čas nošenja – od 15 minut do največ 4 ure na dan.

Garancija:
Zakonsko določeno 24-mesečno jamstvo velja le, če se izdelek uporablja v skladu z navodili za uporabo, se z njim pravilno ravna in se na njem ne izvajajo naknadne spremembe.

Anwendung:
Bei Bedarf wasserbasiertes Gleitgel benutzen. Kugeln vorsichtig einführen. Rückholband zum Halten in der Hand und beim Herausziehen nutzen. In Bewegung bleiben für ca. 15 Minuten.

Anwendungstipps:
Nur wasserbasiertes Gleitgel verwenden. Nicht mit Massageölen verwenden. Vor und nach Gebrauch gründlich reinigen und einen Toy Cleaner benutzen.

Technische Daten:
Material: Medizinisches Silikon ist sehr hautfreundlich, glatt und gleitfreudig. Wasserdichtheit sorgt für feuchtröhrliche Spieleseren. Ergonomisch geformt und besonders sanft einführbar. Mit dem Rückholband jederzeit sicher herausziehbar. Stärkt den Beckenboden für mehr Empfinden beim Sex.

Sicherheitsanweisungen:
Bitte benutze das Produkt nicht in der Schwangerschaft, mit Herzschrittmacher, auf geschwollener oder entzündeter Haut. In folgenden Situationen befrage vor dem Tragen des Produktes unbedingt deinen Arzt: Krankheiten und Verwachsungen, Inkontinenz oder Senkbeschwerden, Schwangerschaft, Allergien, Verhütung mit einer Spirale. Nicht während des Geschlechtsverkehrs tragen, in den ersten 6 Wochen nach einer Geburt und nach Operationen im Beckenbereich darf das Produkt nicht getragen werden, um die Wundheilung nicht zu beeinträchtigen. Danach frage Deinen Arzt um Rat. Während der Menstruation sowie bei vaginalen Infekten ist vom Tragen des Produkts abzuraten. Hinweis: Nur zur vaginalen Anwendung geeignet. Empfohlene Tragedauer – 15 Minuten bis maximal 4 Stunden täglich.

Gewährleistung:
Die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten gilt nur bei produktgerechter Nutzung, sachgemäßer Behandlung und keinen nachträglichen Veränderungen am Produkt.

Der Umwelt zuliebe:
Dieses Produkt kannst Du umweltgerecht im Hausmüll entsorgen.

Kundenservice:
Fragen zum Produkt beantwortet Dir gerne unser Kundenservice: Anfragen per E-Mail an info@mueller.de

Anfragen über das Kontaktformular:
[DE | https://www.mueller.de/kontakt/](https://www.mueller.de/kontakt/) • [AT | https://www.mueller.at/kontakt/](https://www.mueller.at/kontakt/)

Anfragen per Telefon:
[DE | +49 731 725 57000](tel:+4973172557000) • [AT | +43 5 912 000 000](tel:+43591200000)

Application:
Utiliser un gel lubrifiant à base d'eau si nécessaire. Introduire les boules avec précaution. Utiliser la bande de rappel pour tenir dans la main et lors du retrait. Rester en mouvement pendant environ 15 minutes.

Conseils d'utilisation:
Utiliser uniquement un gel lubrifiant à base d'eau. Ne pas utiliser avec des huiles de massage. Nettoyer soigneusement avant et après l'utilisation et utiliser un Toy Cleaner.

Données techniques:
Matériau: Le silicone médical est très doux pour la peau, lisse et glissant. L'élasticité assure des jeux joyeux et humides. Forme ergonomique et insertion particulièrement douce. Peut être retiré à tout moment en toute sécurité grâce à la bande de rappel. Renforce le plancher pelvien pour plus de sensations lors des rapports sexuels.

Instructions de sécurité:
N'utilise pas ce produit si tu es enceinte, si tu portes un stimulateur cardiaque ou si ta peau est enflée ou enflammée. Dans les situations suivantes, consulte impérativement ton médecin avant de porter le produit: maladies et adhérences, incontinence ou troubles de la descente, grossesse, allergies, contraception avec un stérilet. Ne pas porter le produit pendant les rapports sexuels, dans les 6 semaines suivant un accouchement et après une opération dans la région pelvienne, afin de ne pas entraver la cicatrisation. Ensuite, demande conseil à ton médecin. Le port du produit est déconseillé pendant les menstruations ainsi qu'en cas d'infections vaginales. Remarque: ne convient qu'à une utilisation vaginale. Durée de port recommandée – 15 minutes à 4 heures par jour maximum.

Garantie:
La garantie légale de 24 mois n'est valable qu'en cas d'utilisation conforme au produit, de traitement approprié et d'absence de modifications ultérieures du produit.

Pour l'amour de l'environnement:
Tu peux jeter ce produit dans les ordures ménagères en respectant l'environnement.

Service Clients:
Notre service clientèle répondra volontiers à tes questions sur le produit: Demandes par e-mail à info@mueller.de

Demandes via le formulaire de contact:
[DE | https://www.mueller.de/kontakt/](https://www.mueller.de/kontakt/) • [AT | https://www.mueller.at/kontakt/](https://www.mueller.at/kontakt/)

Demandes par téléphone:
[DE | +49 731 725 57000](tel:+4973172557000) • [AT | +43 5 912 000 000](tel:+43591200000)

Primjena:
Po potrebi upotrebijavajte lubrikant na bazi vode. Kuglice pažljivo uvedite. Za držanje i skidanje upotrebijavajte traku za izvlačenje. Nastavite s kretanjem oko 15 minuta.

Savjeti za primjenu:
Upotrebijavajte samo lubrikante na bazi vode. Ne upotrebijavajte s uljima za masažu. Prije i nakon upotrebe temeljito ih očistite i upotrebijavajte sredstvo za čišćenje igraćaka.

Tehničke specifikacije:
Material: Medicinski silikon – vrlo pogodan za kožu, gladak i lako klizi. Vodoootporan – za vesele mokre igrice. Ergonomski oblikovan i posebno jednostavan za umetanje. S trakom za izvlačenje – može se sigurno izvuci u bilo kojem trenutku. Jača dno zdjelice – za više osjeta tijekom seksa.

Sigurnosne Upute:
Molimo nemojte proizvod upotrebijavati ako ste trudni, imate srčani stimulator, kao niti na natečenoj ili upaljenoj koži. U sljedećim situacijama, prije upotrebe proizvoda svakako se posavjetujte sa svojim liječnikom: Bolesti i zarastanja rana, inkontinencija

Druckfarben & Veredelung:

■ SCHWARZ